



## Wundinfiltrationskatheter-Set

### Komplettlösung für das Schmerzmanagement


Das Wundinfiltrationskatheter-Set bietet eine umfassende Lösung für das Schmerzmanagement sowohl während als auch nach einer Operation. Es enthält Nadeln zur Infiltration der Operationsstelle während des Eingriffs sowie einen mehrfach perforierten Anästhesiekatheter zur gezielten postoperativen Schmerzlinderung mit Lokalanästhetika.

Der Anästhesiekatheter ist mit allen CareVis Einweg-Infusionspumpen, einschließlich solcher mit Bolusfunktion, kompatibel und sorgt für eine reibungslose, widerstandsfreie Infusion.

Dieses Set verbessert den Patientenkomfort und unterstützt eine schnellere Genesung.

### Merkmale des Wundinfiltrationskatheter-Sets:

- Bietet eine präzise und gezielte Schmerzlinderung
- Minimiert oder eliminiert den Bedarf an Schmerzmitteln
- Verringert die Nebenwirkungen von Schmerzmitteln
- Beschleunigt die Genesung, verkürzt potenziell die Krankenhausaufenthalte
- Fördert die Patientenmobilität
- Verbesserung der Schmerzwerte auf der visuellen Analogskala (VAS)
- Steigert die Patientenzufriedenheit
- Verfügbar für CareVis-Infusionspumpen mit Luer- und NaX (NR)-Anschlüssen

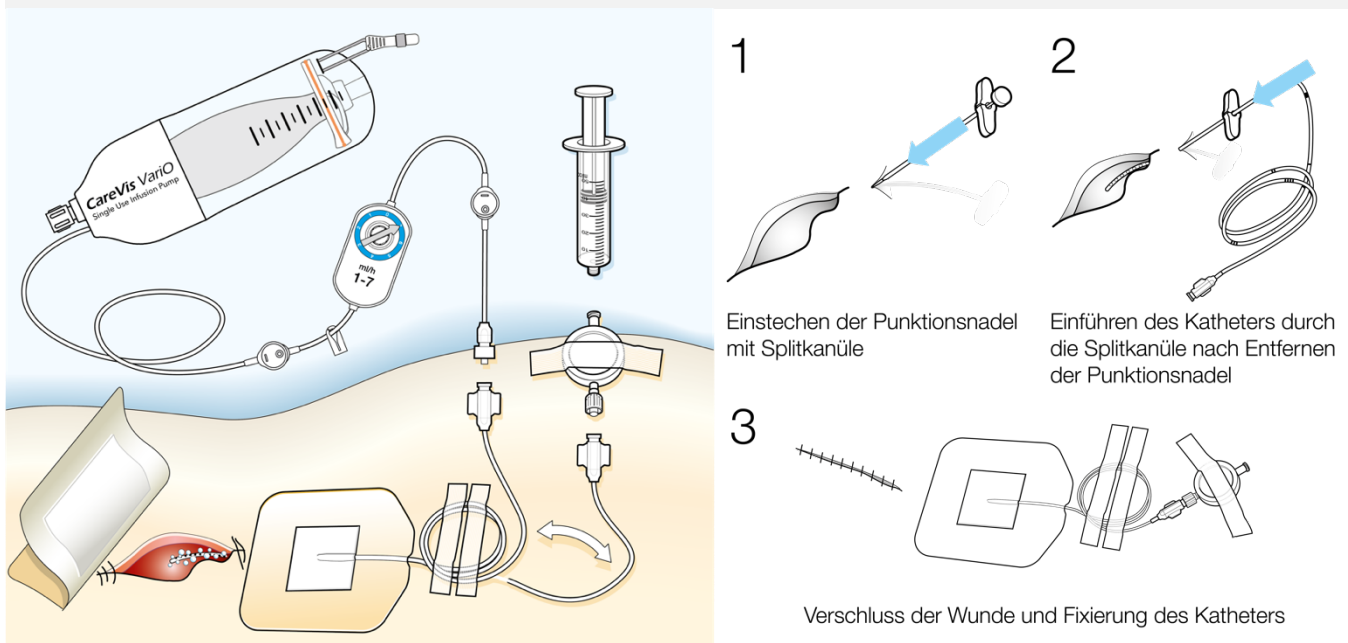

### Inhalt des Wundinfiltrationskatheter-Sets:

- **Anästhesiekatheter:** CNC-gefräste Löcher, umspritzter Konnektor
- **Punktionsnadel:** 18G, 150 mm mit Splitkanüle
- **Infiltrationsnadel:** 18G, 90 mm
- **Antibakterieller Filter:** 0,2 Mikron
- **Spritze:** 2 ml, latexfrei
- **Fixierungsstreifen:** 3 Stück, je 10 cm
- **Pflaster:** PU, 10 cm x 10 cm

# Wundinfiltrationskatheter-Set für CareVis® Infusionspumpen zum Einmalgebrauch



PROMECON

## Spezifikation and Optionen des Katheters

Der Anästhesiekatheter ist mehrfach perforiert und verfügt über ein spiralförmiges Lochmuster, das eine gleichmäßige 360°-Verteilung des Medikaments gewährleistet. Der Perforationsbereich für die Medikamenteninfusion erstreckt sich von der blauen Spitze des Katheters bis zur ersten blauen Markierung. Dank des minimalen Durchflusswiderstands sind Bolusinjektionen sowie Flussraten von bis zu 250 ml/h möglich

Perforierte Länge	Löcher	Länge, gesamt	Verfügbare Konnektoren
2,5 cm	6	70 cm	Luer & NaX (NR)
6,5 cm	12	70 cm	Luer & NaX (NR)
15 cm	30	70 cm	Luer & NaX (NR)
21 cm	42	70 cm	Luer & NaX (NR)
30 cm	60	85 cm	Luer & NaX (NR)

## Bestellinformation

### CareVis Set: Behandlungseinheit für die kontinuierliche Wundinfiltration (CWI)

Das Wundinfiltrationskatheter-Set ist in der **CareVis Set** Behandlungseinheit für die kontinuierliche Wundinfiltration enthalten.

#### Inhalt der CareVis Set Behandlungseinheit:

- **CareVis Einmal-Infusionspumpe, steril, CE 1370:**  
Erhältlich mit kontinuierlicher oder einstellbarer Flussrate in 7 Stufen, wahlweise mit oder ohne Bolusfunktion;  
Details zu den CareVis-Modellen für die Wundinfiltration finden Sie im [Katalog](#).
- **CareVis Tasche, CE:**  
Tragetasche für mobile Patienten zum einfachen Transport der CareVis Infusionspumpe, mit QR-Code für schnellen Zugriff auf den [Patientenleitfaden](#) zur ambulanten Anwendung
- **Spritze, steril, CE 0050:**  
50 ml, Luer-Lock, zum Befüllen\* der CareVis Infusionspumpe mit Medikament.  
\*Zur schnellen und hygienischen Befüllung eignen sich CareVis Connect [Transfer-Sets](#)
- **Wundinfiltrationskatheter-Set, steril, CE 2265:**  
Komplette Lösung für das Schmerzmanagement, mit den [oben](#) aufgeführten Optionen an Kathetern



Weitere Informationen finden Sie unter [www.carevis.com](http://www.carevis.com) oder kontaktieren Sie PROMECON oder Ihren Händler.

## Kontakt

Procedure Pack Producer  
**PROMECON GmbH**  
Kreuslerstr. 10 | 20095 Hamburg | Germany

Tel.: +49 40 3690 1690 | Fax: +49 40 3690 1699  
info@promecon-medical.de | www.promecon-medical.com  
DIN EN ISO 13485:2016

### CareVis Set

Procedure pack nach Art. 22 MDR 2017/745

### CareVis®

ist eine eingetragene Marke der PROMECON